

Návod

Mini masážní pistole



Přehled produktu




Masážní hlavice

Kužel	Koule	U - Tvar	Houba
Jednoduchý kuželovitý tvar umožňuje přímo působit na hlubší tělní svalstvo.	Univerzální hlavice pro snadné masírování celého těla. Vhodný pro začátky.	Postižený sval může být stimulován i nepřímo. Vhodný pro páteř.	Tento nástavec využijte hlavně pro masáž břišních svalů, hrudi nebo nohou.

Použití produktu


Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu tří sekund. Vypnete stisknutím tlačítka Start po dobu tří sekund.

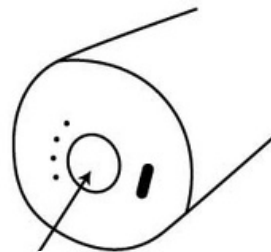


Nastavení rychlosti

Startovací rychlostní stupeň je první rychlostní stupeň. Jedním stisknutím tlačítka Start zvýšíte rychlost o jeden stupeň. Maximální rychlost je 4. Pokud na rychlostním stupni 4 stisknete opět Start, dostanete se na rychlostní stupeň 1.

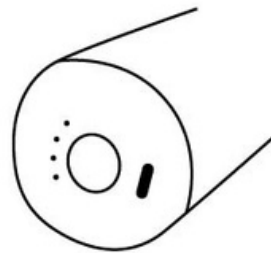

Opatření: Předejděte poškození svalů a kostí a vyvarujte se dlouhodobé masáži v jednom místě. Zapněte si režim inteligentní ochrany, který masážní pistoli automaticky zastaví po 15 minutách.

Výměna masážní hlavice

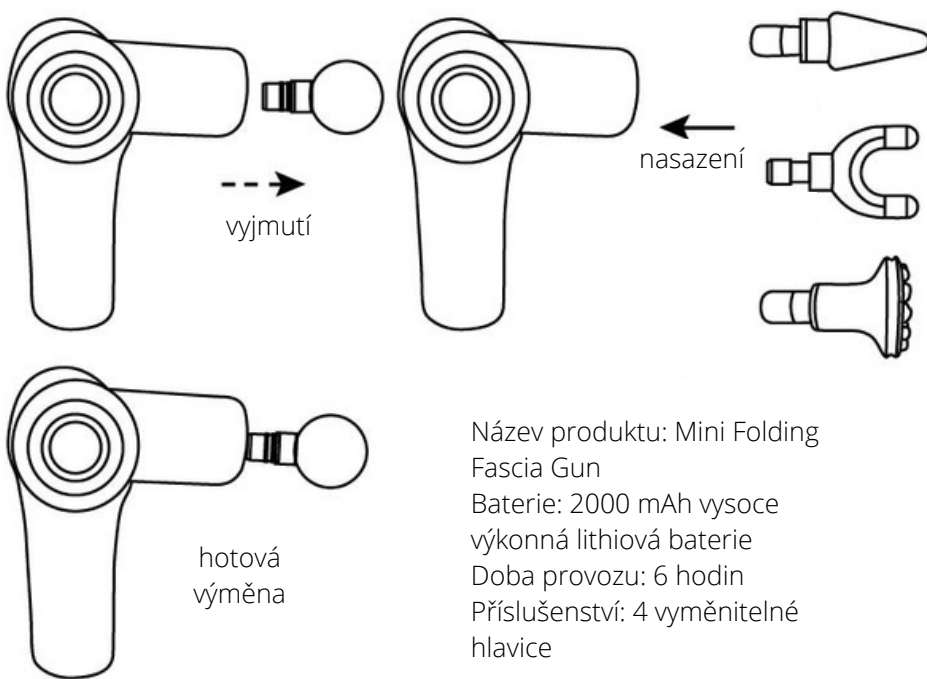


Název produktu: Mini Folding Fascia Gun
Baterie: 2000 mAh vysoce výkonná lithiová baterie
Doba provozu: 6 hodin
Příslušenství: 4 vyměnitelné hlavice


e-sportshop.cz

Kontrolka, signální světlo


Kontrolka indikuje, jaký je zapnutý rychlostní stupeň masážní pistole. Při prvním rychlostním stupni svítí jedna kontrolka, při druhém svítí dvě kontrolky, atd.

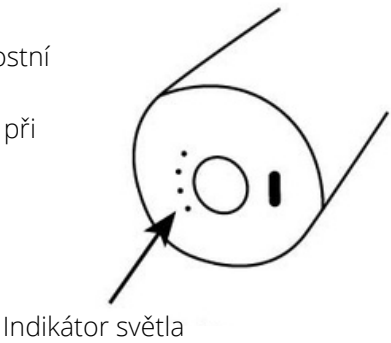

Signální světlo svítí zeleně, pokud je masážní pistole zapnutá. Při zapnutí pistole se 4 kontrolky všechny najednou rozsvítí, pak už svítí podle rychlostního stupně. Při nabíjení svítí signální světlo červeně. Při plném nabití baterie začne svítit zeleně. Pokud je pistole zapnutá, signální světlo blikne 3x každých 5 sekund při plném nabití, 2x každých 5 sekund při nabití méně než 60 % a 1x každých 5 sekund pokud je nabití menší než 30%.

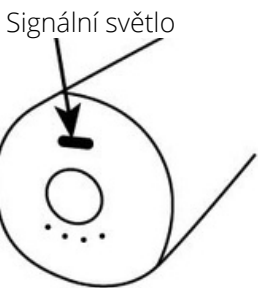

Nabíjení

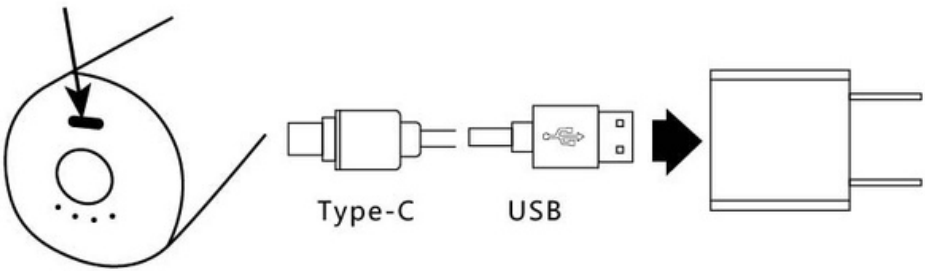

Ujistěte se prosím, že je masážní pistole před prvním použitím plně nabitá. Signální světlo po nabití svítí zeleně. Pokud je nabití menší než 10 %, barva světla se změní na červenou. V tomto případě dejte pistoli nabíjet co nejdříve.

Nepoužívejte pistoli během nabíjení..

Indikace

Bolest a křeče v důsledku namožení svalů a svalového napětí. Pomáhá při otocích. Na zesílení pojivové tkáně a fascie. Ke snížení akumulace kyseliny mléčné ve svalech. Napomáhá zvýšení mobility kloubů. Odstraňuje svalovou únavu.

Nepoužívejte

Pokud máte aneuryzma, krvácíte nebo užíváte léky na ředění krve. Pokud máte srdeční onemocnění, používáte kardiostimulátor nebo defibrilátor. Pokud jste těhotná. Pokud se léčíte s rakovinou. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vnitřní fixace po dobu 90 od zákroku. V blízkosti citlivých oblastí hlavy, obličeje, krčních obratlů a páteře. Na holenní kosti, hřbetu nohou, hřbetu rukou a blízko páteře, kde je menší množství svaloviny.

Záruční list

Model produktu:

Sériové číslo:

Datum prodeje:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

Email:

Na následující případy se záruka nevztahuje:

(1) Pokud se zákazník neprokáže platnou účtenkou a nepředloží záruční list.

(2) Poškození je zapříčiněné nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo použitím přístroje jinak než je uvedeno v jeho návodu na použití.

(3) Do zboží bylo neodborně zasahováno.

Distributor v ČR:
RADANSPOrT s.r.o.
Za Otýlíí 10
370 01 České Budějovice
email: obchod@e-sportshop.cz
tel: +420 387 411 543

Vyrobena v Číně